

ECHOKARDIOGRAPHIE

Ultraschalltisch

- Das verschiebbare Herz-Kreislauf-Panel ermöglicht es Ihnen, die benötigte Öffnungsgröße einzustellen
- Elektrisches oder manuelles Herz-Kreislauf-Schiebepanel öffnet sich bis zu 15" (38 cm). Sehr gut für links- oder rechtshändiges Scannen
- Der Höhenbereich von 22" bis 38" (56-97 cm) unterstützt ergonomische Arbeitshöhen für Echokardiogramme und Stressecho-Untersuchungen
- Speziell für vaskuläre und kardiologische Untersuchungen entwickelt
- Doppelsäulen-Design für zusätzliche Stärke und Steifigkeit ermöglicht eine Traglast von 550 lb (250 kg)



Inspiziert von den führenden ergonomischen Experten in der Sonographie



SOUND | ERGONOMICS

- Verringerung von Verletzungen des Ultraschalldiagnostikers
- Funktionen minimieren Untersuchungszeiten



FM584901

made in the USA
with US & imported parts



OAKWORKS[®]
MEDICAL
Position for Success

ECHOKARDIOGRAPHIE

Ultraschalltisch

Empfohlen für:

- Herzuntersuchungen
- Gefäßuntersuchungen
- Alle Untersuchungen von Bauch- und oberflächlichen Strukturen
- Muskuloskeletale Untersuchungen
- Biopsien



Einstellbare Zugangs-/
Rückenstütze



ECHOKARDIOGRAPHIETISCH #65258-T*

FUNKTIONSMERKMALE	
Zweiteiliger Oberteil	30" (76 cm) breit x 72" (183 cm) lang
Rückenlehne	34" (86 cm) lang
Sitz	38" (97 cm) lang
Bewegung 1	Elektrischer Höhenbereich 22"- 38" (56-97 cm)
Bewegung 2	Elektrische Trendelenburg-/Gegentrendelenburg-Neigung $\pm 15^\circ$
Bewegung 3	Elektrische Fowler-Rückenlehne 0-75 °
Bewegung 4	Manuell verschiebbares Herz-Kreislauf-Panel öffnet 15" (38 cm)
Bedienelemente	Multifunktions-Handsteuerung
Tragfähigkeit	550 lb (250 kg)
Produktgewicht	359 lb (163 kg)
Polsterung	3" (8 cm) Comfort Foam™
Polsterung	Premium, PVC-frei, TerraTouch™
Enthaltene Funktionen	4" (10 cm) Feststell-Laufrollen, Rückenstütze mit einstellbarem Zugang (rechts) 0-85 °, manuelles Herz-Kreislauf-Schiebepanel (links) öffnet 15" (38 cm), Papierrollenhalter
Gewährleistung	3 Jahre Teile, 2 Jahre Arbeit
Sicherheitsaufstufungen	FDA-gelistet, CE-Kennzeichnung, cETLus-genehmigt, CB-Zertifikat

OPTIONEN müssen mit Tisch bestellt werden.		#
Zubehör-Montageplatte	Fowler-Ende	62123
Zentralverriegelung	Nicht mit Patientenlifter-kompatiblen Basisteil verfügbar	61777
Fußsteuerung	Höhe, Trendelenburg, Rückenlehne	61901
Fußsteuerung	Höhe, Trendelenburg, Rückenlehne, Herz-Kreislauf-Panel	65679
Nicht-amerikanisches elektrisches System	bitte kontaktieren Sie uns für Bestelldetails	73134
Patientenlifter-kompatibler Basisteil	Nicht mit Zentralverriegelungssystem verfügbar	65893
Seitenschienen (2er-Set)	23,5" (60 cm) lang x 6" (15 cm) hoch (von der Tischoberfläche)	61781
Herz-Kreislauf-Schiebepanel - elektrisch	Manuelles Panel aktualisieren öffnet 15" (38 cm)	73131
ZUBEHÖR jederzeit bestellen.		#
Abnehmbare Armlagerung	Verwenden Sie mit T-Schienenadapter 5" (13 cm) breit x 20,5" (52 cm) lang	62192
T-Schienenadapter 8" (20 cm) lang	Wird an der Rückenlehne befestigt zur Verwendung mit T-Schienen-Zubehörteilen im USA-Format	61902
Tischverlängerung	24" (61 cm) breit x 12" (30 cm) lang (erfordert Montageplatte)	63487
QuickLock™ Kopfstütze (schwarz) & AeroCel-Kissen	Bequeme, einstellbare Bauch- oder Rückenstütze (erfordert Montageplatte)	PKG7554-T*

*Farbcode der Polsterung muss angegeben werden.

ULTRASCHALL FUNKTIONEN UND OPTIONEN

ZENTRALES ARRETIERSYSTEM #61777

Arretieren Sie Ihren Tisch einfach mit unserem einzigartigen System, welches das Arretieren von beiden Seiten des Tisches ermöglicht.



OPTIONAL

SEITENSCHIENEN #61781

Erhöhen Sie Stabilität und Sicherheit für Ihren Patienten. Bei Nichtgebrauch aus dem Weg klappen. 23,5" (60 cm) lang x 6" (15 cm) hoch (von der Tischoberfläche)



OPTIONAL

VOLLFUNKTIONSFUSSSTEUERUNG

Teilnummer anfragen

Sie können ein Fußsteuerelement hinzufügen, das alle Funktionen steuert.



Multifunktions-Fußsteuerung

OPTIONAL

BASISTEIL FÜR PATIENTENLIFTER GEEIGNET #65893

Diese Option ermöglicht die Verwendung von Patientenliftern und einfachen Transfer vom Rollstuhl, um Verletzungen von Pflegepersonal bei Patiententransfers zu minimieren oder zu eliminieren. Die hohe Bodenfreiheit macht es möglich, dass alle Patientenlifter für stabile Transfers leicht unter die Tischmitte gleiten können, wobei der geringe Höhenbereich der Tische, die einfachen Rollstuhltransfer ermöglichen, nicht vergrößert wird. Muss mit dem Tisch bestellt werden.

- Beinhaltet größere, feststellbare Schwerlastlaufrollen mit 5" (13 cm) Durchmesser
- Bietet Bodenfreiheit von 6,5" (17 cm) für Patientenlifter
- Bei dieser Option ist die Zentralverriegelung nicht verfügbar



OPTIONAL

RÜCKENSTÜTZE MIT EINSTELLBAREM ZUGANG

Rechts: #73132

Einstellbar mit 5 Positionen 0-85°, ermöglicht dem Ultraschalldiagnostiker einen einfachen Zugang von anderen Seite und bietet Rücken-Unterstützung für Patienten. 10" (25 cm) breit x 15,5" (39 cm) lang



STANDARD

ELEKTRISCHES HERZ-KREISLAUF-SCHIEBEPANEL #73131

#73131

Die elektrische Version ermöglicht es Ihnen, die benötigte Öffnungsgröße bis zu 15" (38 cm) einzustellen. 10" (25 cm) breit x 28" (71 cm) lang. Sehr gut für links- oder rechtshändiges Scannen. Kann auch als Armstütze verwendet werden.



OPTIONAL

ZUBEHÖR-MONTAGEPLATTE #62123

#62123

Fügen Sie Ihrem Tisch eine Gesichtsauflage oder eine Tischverlängerung hinzu.



OPTIONAL

ULTRASCHALL- ZUBEHÖR


ABNEHMBARE ARM- LAGERUNG #62192-T*

Wird am T-Schienenadapter befestigt und dreht sich um 140 Grad. 5" (13 cm) breit x 20,5" (52 cm) lang (erfordert T-Schienenadapter)



T-SCHIENENADAPTER #61902

Mehrere Befestigungsorte erlauben die Wahl des besten Platzes für dieses leicht zu installierende und zu entfernende Zubehör, das bis zu 150 lb (68 kg) tragen kann. Kann mit jedem amerikanischen Standardzubehör verwendet werden. 8" (20 cm) lang

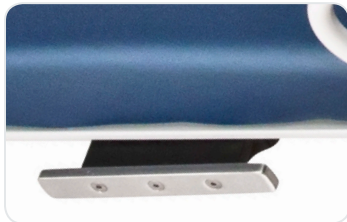

TISCHVERLÄNGERUNG #63487-T*

Verlängert den Tisch um 12" (31 cm) auf 84" (213 cm), um den Hals des Patienten für Karotis-Untersuchungen und Schilddrüsenuntersuchungen zu erreichen. 24" (61 cm) B x 12" (31 cm) L



QUICKLOCK™ KOPFSTÜTZE & AERO·CEL KISSEN #PKG7554-T*

Die Plattform ermöglicht eine präzise zervikale Beugung und Höhenpositionierung in einem breiten Bereich für Behandlungen in Bauch- und Rückenlage. (Erfordert Zubehör-Montageplatte)




TERRATOUGH™ -POLSTERUNG

Erfüllt die Anforderungen von ISO 10993-1:2009 zur Prüfung der Biokompatibilität von medizinischen Tischen und besteht Tests auf Zytotoxizität, Hautirritationen und Sensibilisierung sowie CA TB117 Feuerhemmungstests. Eine Liste der zugelassenen Reinigungs- und Desinfektionsmittel finden Sie in der Produktreinigungsanleitung.

POLSTERUNG



3" Comfort Foam™
Mehr Komfort und
Unterstützung

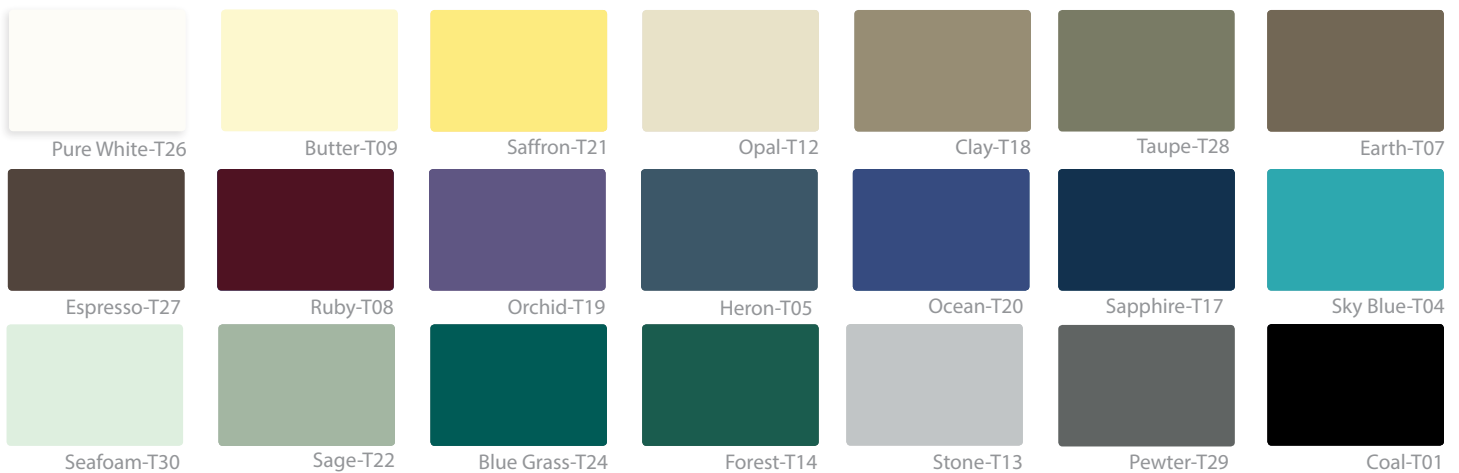

Wir bemühen uns sicherzustellen, dass die Farben, die in unseren Produktbildern (online und im Druck) angezeigt werden, so genau wie möglich sind. Aufgrund der Begrenzungen von Druckern, Scannern, Computermonitoren und anderen Geräten sind die Farben möglicherweise nicht korrekt.

Sehen Sie sich unser
gesamtes Sortiment
medizinischer Produkte



#72703

Scannen Sie diesen Code mit
Ihrem Smartphone



KONTAKT:

717.235.6807 www.oakworksmid.com E-Mail: customerservice@oakworks.com